

# LENTI PER VITREO MONOUSO



codice prodotto	MV LV40	MV LV41	MV LV42	MV LV43	MV LV45	MV LV48
Tipo	PIANA	GRANDE CAMPO	BICONCAVA	INGRANDENTE	30° PRISM	GRANDE CAMPO RETINA
Immagine						
SEZIONE						
Static FOV	36°	48°	25°	30°	33°	112°/134°
ingrandimenti	1,02x	0,49x	0,80x	1,49x	1,02x	0,39x
descrizione	la superficie anteriore piana permette un campo visivo a 36 gradi del polo centrale posteriore e del vitreo in occhi fachici o pseudofachici. Questa lente è ideale per fotografare.	La superficie anteriore concava facilita un campo visivo a 48 gradi visualizzando il polo centrale posteriore e il centro del vitreo in occhi fachici e pseudofachici.	le 83D biconcave della lente facilita una visione del fondo con l'uso di aria nella cavità vitreale, in occhi fachici e pseudofachici.	Per una esame dettagliato durante la manipolazione chirurgica delle membrane retiniche.	Permette una visualizzazione del perimetro posteriore del fondo e del vitreo oltre la linea equatoriale con minima distorsione in occhi fachici, afachici e pseudofachici.	Ampio campo di visione di tutta la retina. Disponibile con anello in silicone removibile. La ridotta altezza facilita la sistemazione sul bulbo oculare. Utilizzabile con un invertitore.
Line Drawing						
sterilizzazione	ossido di etilene					

Lenti in PMMA ad alta risoluzione, con anello di silicone per garantirne la stabilità durante l'uso.

Le lenti monouso per vitrectomia PHAKOS sono realizzate per essere usate una sola volta. Sono confezionate singolarmente in confezione sterile. Confezione indivisibile da 10 pezzi. L'anello di silicone sostituisce l'anello in metallo suturabile; comunque l'anello di silicone può essere rimosso se il chirurgo preferisce usare l'anello suturabile.

FABBRICANTE: **PHAKOS**  
62, Rue Kléber  
93100 MONTREUIL-France  
CE 0459

Rivenditore esclusivo per l'Italia  
SIR OFTALMICA SRL - COMO  
V.le Rosselli 31 tel 031-570869 fax 031-572826  
e-mail: info@siroftalmica.com

## **SCHEDA TECNICA DM MV LV46 ; MV LV47**

Codice articolo: MV LV46 ; MV LV47
Descrizione: LENTI DA GONIO
Caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"><li>- Disponibile DESTRA (MV LV47) e SINISTRA (MV LV46)</li><li>- La lente da gonio Phakos conferisce chiare immagini dell'angolo della camera anteriore, perfette per la chirurgia del glaucoma e la goniotomia.</li><li>- La qualità superiore delle lenti conferisce una visuale nitida, ad alta risoluzione</li><li>- Il profilo ridotto è anche utile per la gonioscopia pediatrica post-operatoria</li></ul>
Composizione: PMMA
Fabbricante: PHAKOS
Classe: I sterile
Codice iscrizione repertorio D.M. 1374809/R
Codice CND: V030203(sistemi per misurazione in oftalmologia)
Confezionamento: scatola contenente 5 sacchetti in doppia busta
Condizioni di utilizzo per un paziente: sacchetto contenente una lente
Istruzioni d'uso fornite con il dispositivo
Dispositivo medico MONOUSO
Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene
Validità di sterilizzazione: 3 anni
Latex free / Origine animale: no
legato ad un dispositivo medico: no
Impiantabile: no



# MANICO BACK-FLUSH MONOUSO COMPLETO DI CANNULA E SERBATOIO

## SERIE 20 GAUGES

**MV BF66**  
Ago back-flush 20g con punta protetta in silicone

**MV BF67**  
Ago back-flush 20g punta smussa

**MV BF72**  
Ago back-flush con punta protetta in silicone,  
trapezoidale da 20G a 23G

**MV BF73**  
Ago back-flush punta smussa  
Trapezoidale da 20G a 23G

**MV BF76**  
Ago back-flush 20G con punta protetta in  
silicone per aspirazione ATTIVA

**MV BF78**  
Ago back-flush con punta scraeper da 20G

## SERIE 23 GAUGES

**MV BF68**  
Ago back-flush 23G con punta protetta in silicone

**MV BF69**  
Ago back-flush 23G punta smussa

**MV BF70**  
Ago back-flush con punta protetta in  
Silicone per aspirazione ATTIVA


**MV BF80**  
Ago back-flush con punta scraeper da 23G

## SERIE 25 GAUGES

**MV BF74**  
Ago back-flush 25G con punta protetta in silicone

**MV BF75**  
Ago back-flush 25G punta smussa

**MV BF79**  
Ago back-flush con punta scraeper da 25G

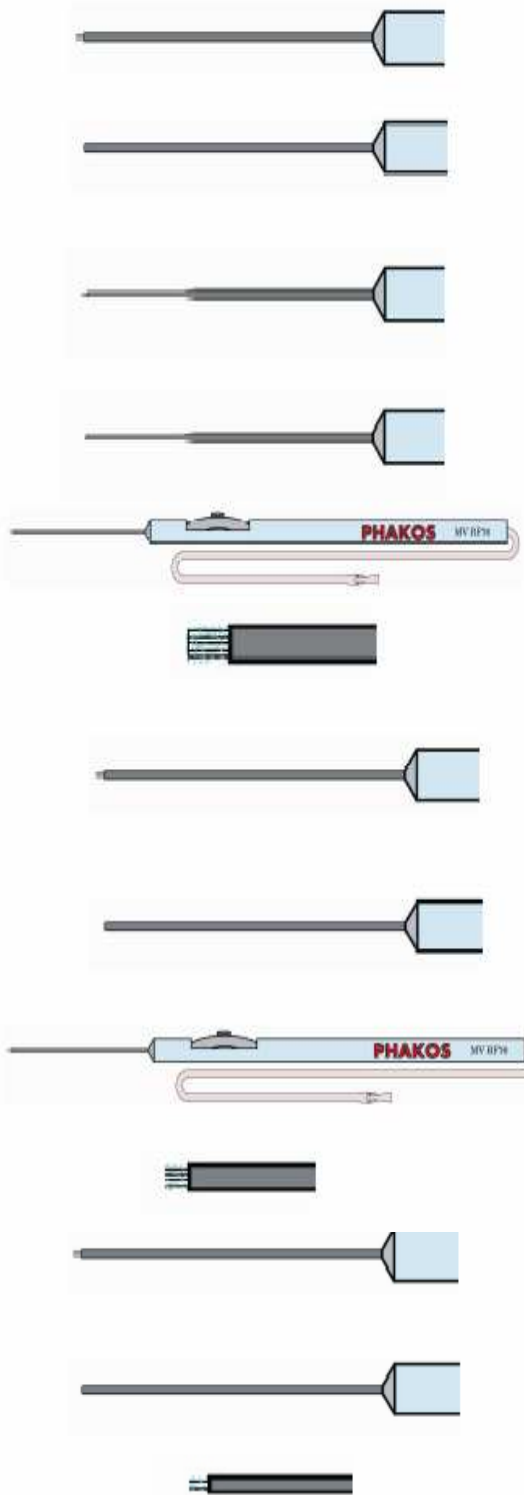


Rivenditore esclusivo per l'Italia



	MV BF66	MV BF67	MV BF76	MV BF77	MV BF78	MV BF68	MV BF69	MV BF70	MV BF71	MV BF80	MV BF74	MV BF75	MV BF79	MV BF81	MV BF82	MV BF72	MV BF73
Canule 20 gauges	X	X	X	X	X												
Canule 23 gauges						X	X	X	X								
Canule 25 gauges										X	X	X	X	X			
Canule 20 / 23 gauges															X	X	
Bout mousse		X		X		X		X			X			X		X	
Brosse	X		X		X		X			X			X		X		
Gratteuse				X				X				X					
Aspiration active			X	X			X	X					X	X			
Aspiration passive	X	X			X	X	X		X	X	X	X			X	X	
Conditionnement	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	10	10	


CE 0459

## RETRATTORE IRIDEO MONOUSO MV RI22

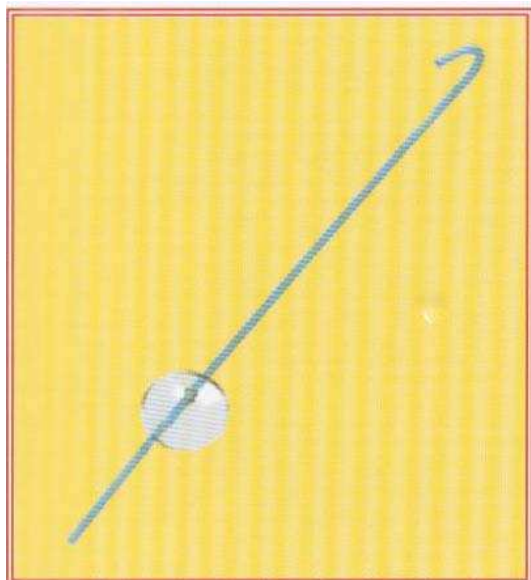

Il retrattore irideo MV RI22 è un dispositivo chirurgico sterile monouso. Nel caso in cui una dilatazione con l'aiuto di mezzi farmaceutici è impossibile, il retrattore dell'iride è una soluzione semplice, rapida e sicura. Il retrattore dell'iride MV RI22 è composto da un uncino in filo sintetico e una pastiglia (blocco) mobile in silicone.

Il retrattore dell'iride MV RI22 è uno strumento monouso, disegnato per provvedere temporaneamente alla dilatazione meccanica pupillare.

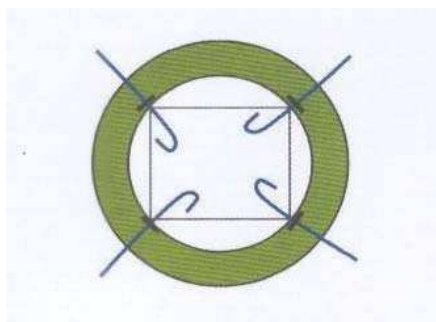

### MV RI22 CF

Retrattore per l'iride monouso.

Ogni set è composto da 6 uncini.

La confezione contiene 5 buste da 6 uncini.


## RETRATTORE IRIDEO MONOUSO MV RI22

Fabbricante: **PHAKOS**  
[info@phakos.com](mailto:info@phakos.com)

62, Rue Kléber 93100 Montreuil  
Tél +33 01 49 88 74 00 - Fax +33 01 49 88 72 88

CE 0459

Rivenditore esclusivo per l'Italia:

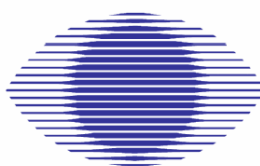

**SIR** oftalmica

Strumenti chirurgici per oftalmologia  
Viale Rosselli nr. 31 - 22100 COMO  
Tel. 031-570869 fax 031-572826  
E-mail: [info@siroftalmica.com](mailto:info@siroftalmica.com)