

ARZTHOCKER ak 445 | DOCTOR STOOL ak 445

FUNKTIONEN

- Höhenverstellbarer Arzthocker mit einer Vielzahl an sinnvollen und ergonomisch wertvollen Optionen. Alle Standardfunktionen oder zusätzliche Optionen ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Eingriffen, sowie eine ergonomische günstige Sitzhaltung des Operateurs ohne nachteilige Langzeitschäden.



STANDARDVERSION

- Höhenverstellung mit Handbedienung
- Doppel- Leichtlaufrollen

OPTIONEN

FUSSAUSLÖSUNG

- Für Höhenverstellung unter sterilen Bedingungen.



FEATURES

- Height adjustable doctor stool, offering a number of sensible and ergonomically valuable options. All standard functions or additional options have been designed to support a fatigue free seating posture of the surgeon even during extended procedures and preventing any long term strains due to improper seating positions.

STANDARD-VERSION

- Height adjustable, hand released
- Heavy duty dual castors

OPTIONES

FOOT RELEASE

- For height adjustment under sterile conditions.

OPTIONEN

RÜCKENLEHNE

- Die höhenverstellbare Rückenlehne ist federnd oder feststellbar.



STANDARDARMLEHNE

- Die Standardarmlehne lässt sich in der Höhe verstellen und rotiert.




ARM REST STANDARD

- The standard arm rest features height adjustment and rotation.

MEHRGELENKSARMLEHNE

- Die höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich auf einem Kugelgelenk in jede gewünschte Position kippen und rotieren...

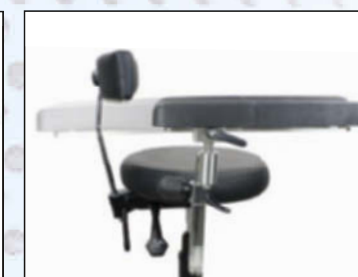

...und auf einer Schiene vor und zurück schieben

MULTI ARTICULATED ARM REST

- The height adjustable arm rests pivot and tilt to any desired position on a ball joint...

...the pads also slide fwd – bwd on a rail

ARZTHOCKER ak 447 | DOCTOR STOOL ak 447

FUNKTIONEN

- Höhenverstellbarer Arzthocker mit einer Vielzahl an sinnvollen und ergonomisch wertvollen Optionen. Die Sattelform des Sitzes ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längeren Eingriffen, sowie eine ergonomische günstige Sitzhaltung des Operateurs ohne nachteilige Langzeitschäden.



STANDARDVERSION

- Höhenverstellung mit Handbedienung
- Doppel- Leichtlaufrollen

FEATURES

- Height adjustable doctor stool, offering a number of sensible and ergonomically valuable options. The saddle shaped seat cushion has been designed to support a fatigue free seating posture of the surgeon even during extended procedures and preventing any long term strains due to improper seating positions.

STANDARD-VERSION

- Height adjustable, hand released
- Heavy duty dual castors

- Der Sattelsitz ist auf und ab neigbar
- The saddle seat tilts up and down.



OPTIONEN

FUSSAUSLÖSUNG

- Für die Höhenverstellung unter sterilen Bedingungen

FOOT RELEASE

- For height adjustments under sterile conditions.

RÜCKENLEHNE

- Die höhenverstellbare Rückenlehne ist federnd oder feststellbar.

BACK REST

- The height adjustable back rest is spring loaded, but also lockable in position.

OPTIONS



Arztthocker ak 445 + ak 447

Doctor Stool ak 445 + ak 447



Technische Daten	Technical Data	ak 445 fr	ak 445 hr	ak 447
Durchmesser Fußkreuz	Diameter base	600 mm	600 mm	600 mm
Durchmesser Rollen	Diameter castors	50 mm	50 mm	50 mm
Höhenverstellung	Height adjustment	530 - 720 mm	530 - 720 mm	530 - 720 mm
Sitzfläche	Seat cushion	420 mm	420 mm	430 x 340 mm
Dicke Polster Sitzfläche	Thickness seat cushion	80 mm	80 mm	80 mm
Höhenverstellung Armlehnen	Height adjustment arm rest	140 - 290 mm	140 - 290 mm	-
Maiximale Belastung (zentral)	Maximum load (center)	135 kg	135 kg	135 kg

