

OTTOTIPO

Un Ottotipo a progressione geometrica con le seguenti peculiarità

La sezione pazienti permette la memorizzazione dei dati dei pazienti con i loro risultati

- SEMI LOG
- LOG
- CROCE
- OROLOGIO
- NUMERI
- BAMBINI
- ALBINI
- TEST VELOCITÀ DI LETTURA 40 CM
- TEST VELOCITÀ DI LETTURA CON CONTRASTO VARIABILE
- ROSSO VERDE
- TEST PER VICINO 40 CM
- MESO/GLARE TEST
- TEST VISIONE CROMATICA LETTERE GRANDI
- TEST VISIONE CROMATICA FIGURE GRANDI
- TEST VISIONE CROMATICA LETTERE PICCOLE
- TEST VISIONE CROMATICA FIGURE PICCOLE
- S. CONTRASTO LETTERE
- S. CONTRASTO NUMERI
- VARI

La versatilità del remote control permetterà l'utilizzo dell'applicazione senza bisogno di essere vicino al paziente.


- Presentazione random immagini, numeri e lettere
- Valutazione separata dei due occhi
- Inversione del contrasto
- Per analfabeti
- Per bambini
- Per simulatori
- Contrasto di lettura
- Contrasto critico di stampa



I vari test per il visus sono generati da un algoritmo, che sulla base della distanza impostata calcola la dimensione delle lettere, la distanza tra le stesse e tra le singole righe.

Per gli altri ottotipi visualizzeremo le singole immagini scelte dal catalogo, che verranno posizionate e dimensionate secondo i criteri di cui sopra.

I test Velocità di lettura sono caratterizzati da una serie di frasi random sulla base di una distanza di lettura di 40cm.

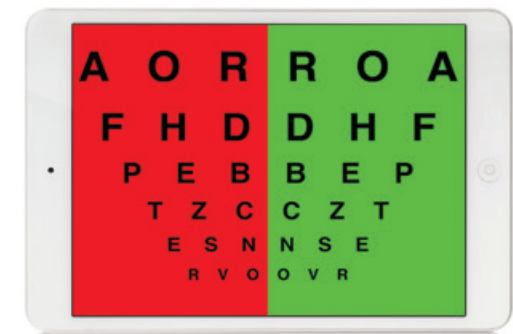

Ideato e sviluppato 100% in Italia

Strumento medico in CLASSE I registrato al Ministero della Salute
Apparecchio elettromedicale CLASSE I è conforme alla norma EN. 60601-1.

Le caratteristiche tecniche dello strumento e dei suoi accessori possono essere migliorate in qualsiasi momento e senza preavviso.
Per ottenere una descrizione aggiornata si consiglia di visitare il sito web www.sbmsistemi.com

TEST DI AMSLER

Si tratta di un test molto semplice che possiamo fare tranquillamente a casa in qualsiasi momento. Lo scopo del test è individuare il più precocemente possibile la METAMORFOPSIA che è il sintomo più tipico e precoce della degenerazione maculare.

Per metamorfopsia intendiamo la deformazione, ondulazione, distorsione di tutto ciò che è dritto.

La griglia è uno strumento di diagnostica che aiuta a rilevare difetti visivi causati da imperfezioni della retina, del nervo ottico e della trasmissione degli impulsi visivi al cervello.

- STANDARD
- SCOTOMI COLORE
- METAMORFOPSIA ORIZZONTALE
- METAMORFOPSIA VERTICALE
- CENTRALE
- MOVIMENTO ORIZZONTALE
- MOVIMENTO VERTICALE

